
ai'am motion


Vidéos pour le rapport de base


Deux courtes vidéos de la marche, filmées à main levée sur iPad ou iPhone dans l'application ai'am motion.

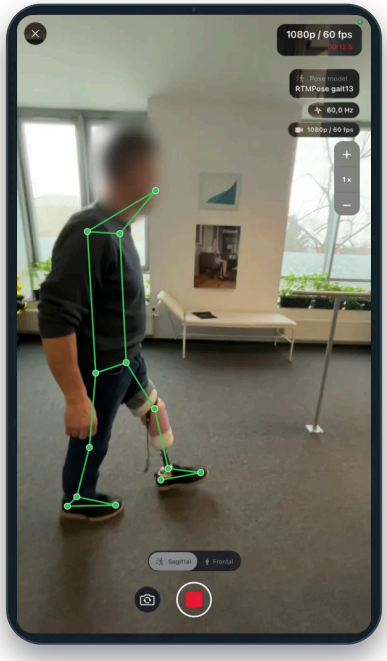

Vidéo de profil. L'application repère elle-même les articulations, vous vous occupez du cadrage.

Dans l’application

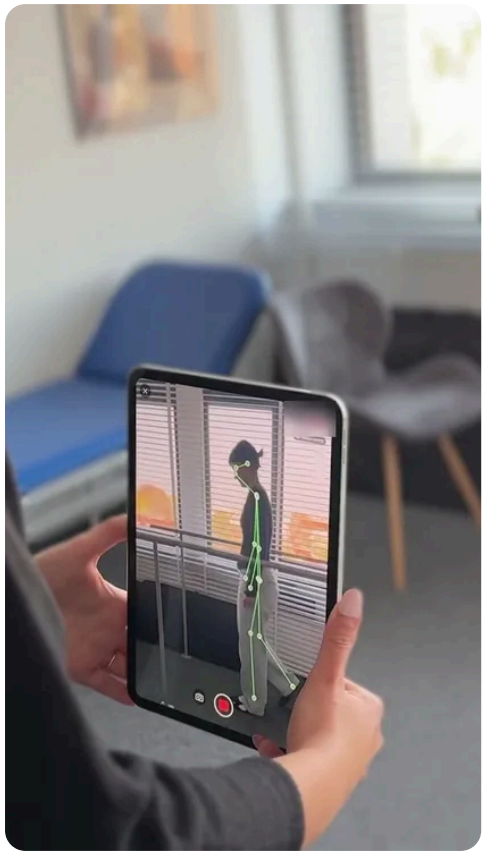

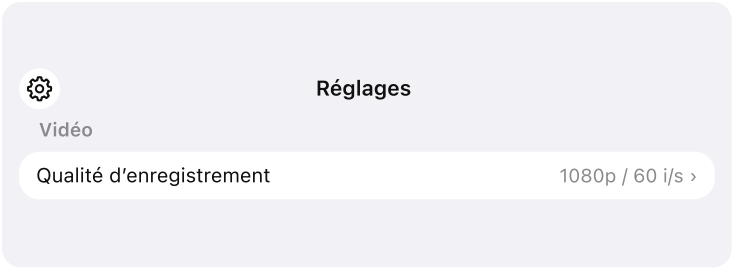

01

Réglez la qualité vidéo

Sur l’écran **Patients**, touchez la roue dentée. Dans **Vidéo**, réglez **Qualité d’enregistrement** sur **1080p / 60 i/s**. 1080p / 30 i/s convient aussi.



02

Ajoutez le patient


Touchez l’icône personne avec un plus, puis remplissez **Prénom** et **Nom**. L’e-mail et les notes sont facultatifs. Validez avec **Enregistrer**.



03

Commencez une visite

Ouvrez la fiche du patient et touchez **Nouvelle visite**, pas **Enregistrer**. L’aperçu affiche des points et des lignes sur ses articulations.

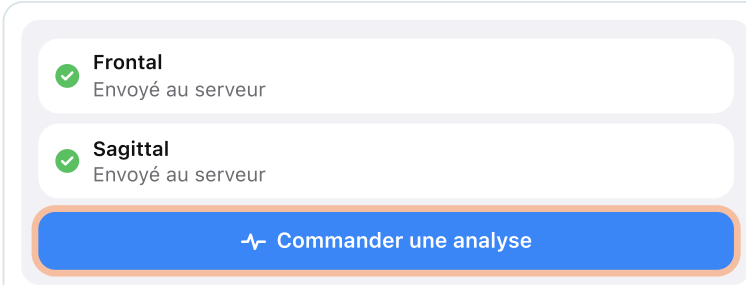


04

Commandez une analyse

Quand les deux vidéos affichent **Envoyé au serveur**, confirmez les données et la langue du rapport, puis touchez **Commander une analyse**.

Placez l'appareil avant de filmer

Les trois mêmes règles valent pour les deux vidéos. Si une seule n'est pas respectée, il faut refaire la vidéo.

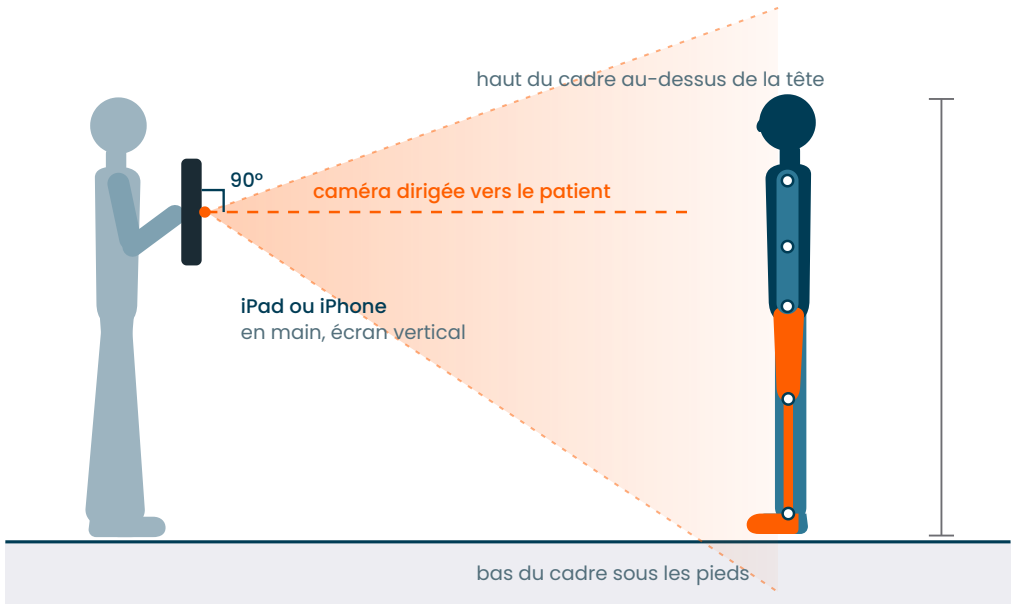

Vertical, perpendiculaire au sol

Un appareil incliné déforme les proportions du corps et les angles articulaires.

Naturel et stable


Inutile de viser exactement les hanches du patient. Tenez l'appareil comme cela vous convient, tant que la caméra ne monte pas et ne descend pas pendant la vidéo.


Tout le corps dans le cadre

De la tête aux pieds, pendant la plus grande partie de la vidéo. Si le corps entier ne rentre pas, reculez.

Deux vidéos de marche

Les schémas montrent la salle vue de dessus. Le cône orange est le champ de la caméra. À côté, ce qui doit apparaître à l'écran.

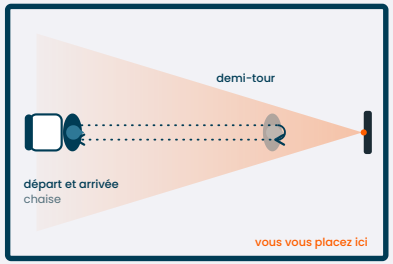

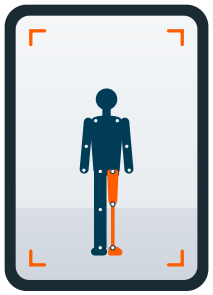

Le patient marche vers vous, entièrement dans le cadre


1


Marche face à la caméra

Au départ, le patient est assis sur une chaise. Placez-vous face à lui, aussi loin que la salle le permet, pour que la distance de marche soit la plus longue possible.

1. Le patient se lève de la chaise.
2. Marche vers la caméra.
3. Fait demi-tour.
4. Revient au point de départ.
5. S'assoit sur la chaise.

Le patient ne fait qu'un seul passage.

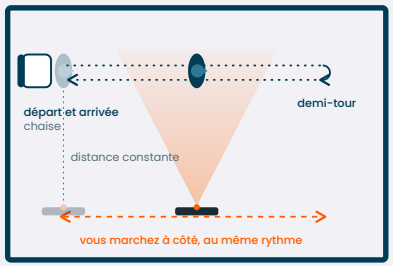

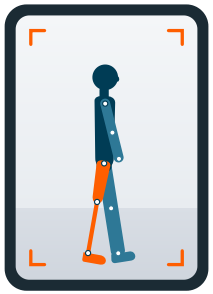

Le patient vu de profil, de la tête aux pieds

2


Marche de profil

Au départ, le patient est assis sur une chaise. Vous marchez à côté de lui, en gardant l'appareil à hauteur et à distance constantes.

1. Le patient se lève de la chaise.
2. Marche dans une direction.
3. Fait demi-tour.
4. Revient au point de départ.
5. S'assoit.


Le patient ne fait qu'un seul passage.

Quatre erreurs qui obligent à refaire la vidéo

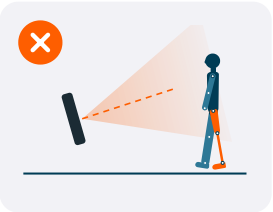


Appareil incliné

La caméra filme vers le haut ou vers le bas et déforme les angles. Tenez l'appareil vertical.

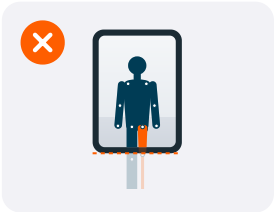


Pieds hors du cadre

Ils peuvent sortir du cadre un instant, mais doivent rester visibles la plupart du temps. S'ils ne rentrent pas, reculez (sur iPhone, le zoom 0.5× aide aussi).

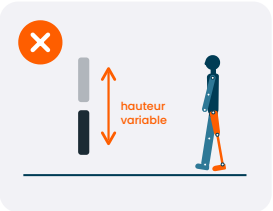

Caméra instable

Lever et baisser brusquement l'appareil décale le cadre. Gardez-le stable pendant toute la vidéo.

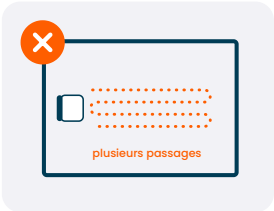

Plusieurs passages dans un fichier

Le patient marche une seule fois : aller, demi-tour, retour, puis il s'assoit.

---

ai'am motion

Guide d'enregistrement de l'application ai'am motion. En cas de problème, écrivez-nous à support@aiam.care