
ai'am motion


Nagrania do raportu podstawowego


Dwa krótkie nagrania chodu, wykonane z ręki iPadem lub iPhone'em w aplikacji ai'am motion.

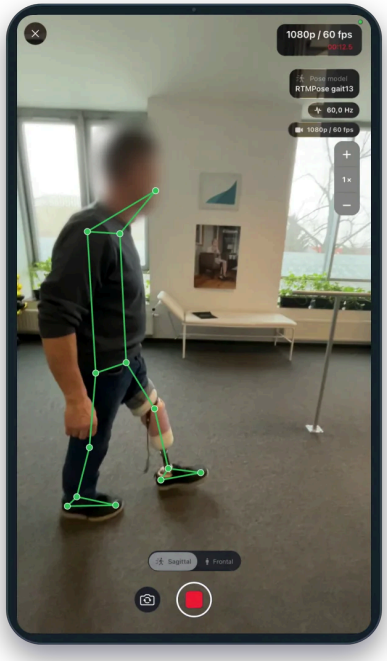

Nagranie z boku. Aplikacja sama zaznacza stawy, a Ty dbasz o kadr.

W aplikacji

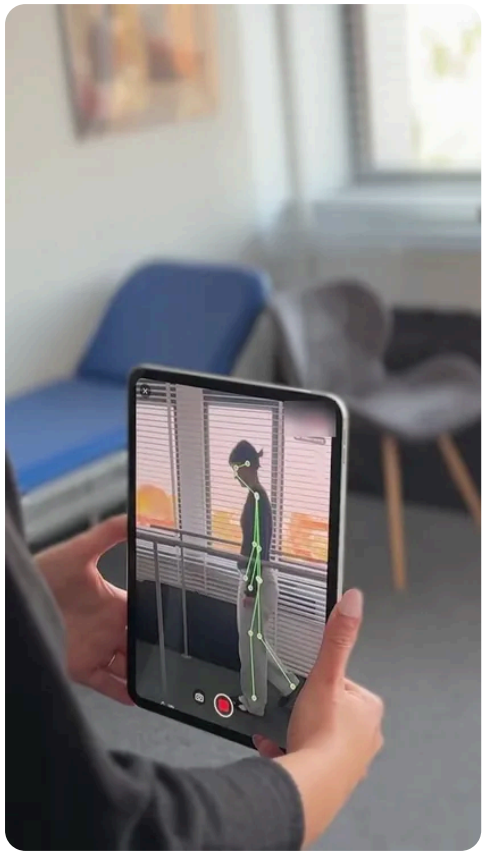


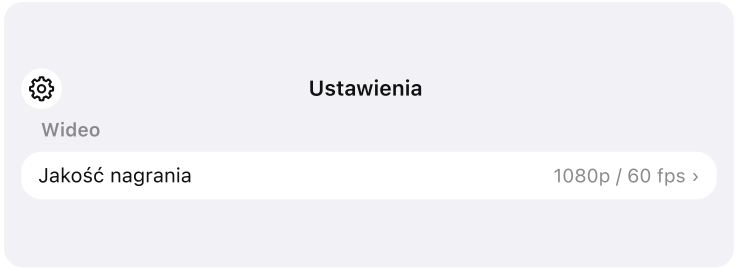

01

Ustaw jakość wideo


Na ekranie **Pacjenci** dotknij ikony koła zębatego. W sekcji **Wideo** otwórz **Jakość nagrania** i wybierz **1080p / 60 fps**. Można też 1080p / 30 fps.

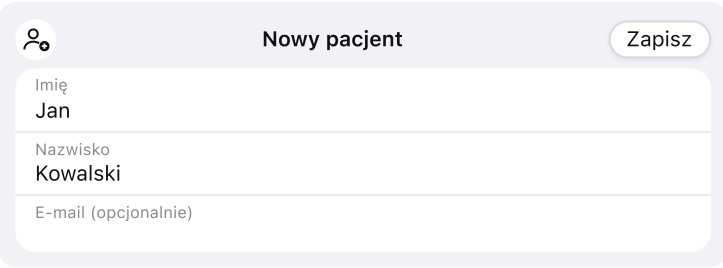

02

Dodaj pacjenta


Dotknij ikony osoby z plusem i wypełnij pola **Imię** i **Nazwisko**. E-mail i notatki są opcjonalne. Zatwierdź przyciskiem **Zapisz**.

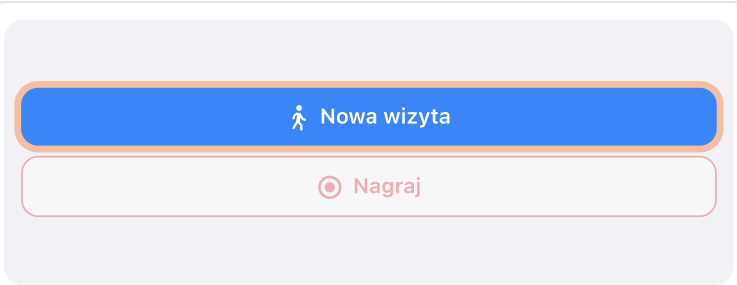

03

Rozpocznij wizytę

Otwórz pacjenta z listy i dotknij **Nowa wizyta**, a nie **Nagraj**. Na podglądzie pojawią się punkty i linie na stawach pacjenta.

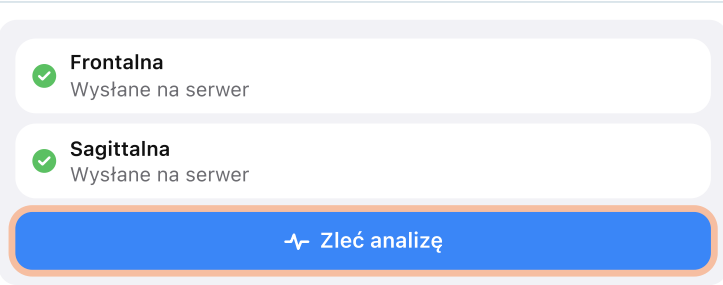


04

Zleć analizę

Gdy przy obu nagraniach pojawi się **Wysłane na serwer**, potwierdź dane wizyty i język raportu, a potem dotknij **Zleć analizę**.

Ustaw urządzenie, zanim zaczniesz nagrywać

Te same trzy zasady dotyczą obu nagrań. Jeśli choć jedna nie jest spełniona, nagranie trzeba powtórzyć.

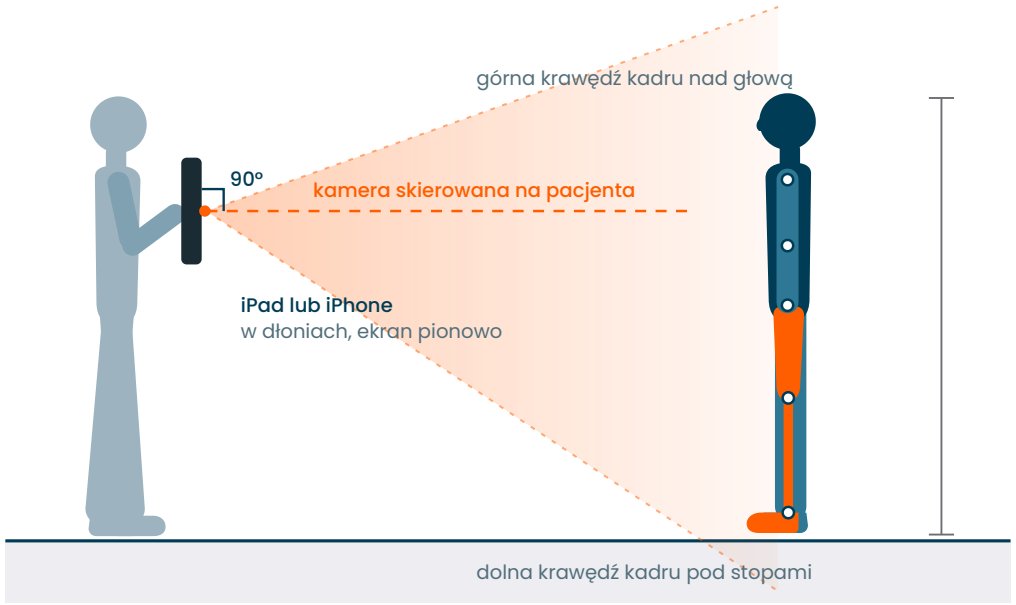

Pionowo, pod kątem prostym do podłogi

Pochylone urządzenie zniekształca proporcje ciała i kąty w stawach.

Swobodnie i stabilnie


Nie musisz celować dokładnie w biodra pacjenta. Trzymaj urządzenie tak, jak Ci wygodnie, byle kamera nie podskakiwała w górę i w dół podczas nagrania.


Całe ciało w kadrze

Od głowy do stóp, przez jak największą część nagrania. Jeśli całe ciało się nie mieści, cofnij się.

Dwa nagrania chodu

Rysunki pokazują pomieszczenie z góry. Pomarańczowy klin to pole widzenia kamery. Obok widać, co powinno być na ekranie.

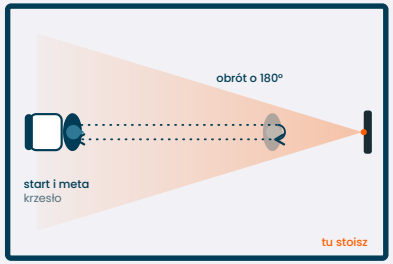

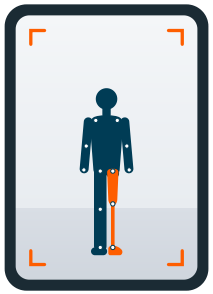

Pacjent idzie w Twoją stronę, cały w kadrze


1


Chód w stronę kamery

Na początku pacjent siedzi na krześle. Stań naprzeciw niego, tak daleko, jak pozwala pomieszczenie, aby odcinek chodu był jak najdłuższy.

1. Pacjent wstaje z krzesła.
2. Idzie w stronę kamery.
3. Obraca się o 180°.
4. Wraca do punktu startu.
5. Siada na krześle.

Pacjent przechodzi tylko raz.

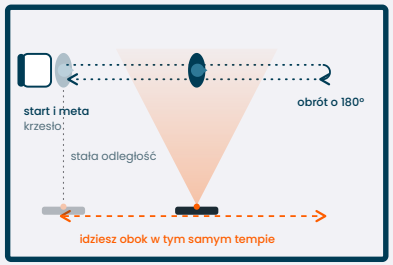

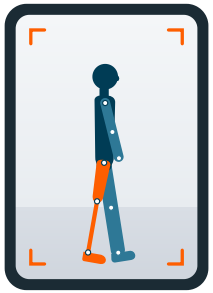

Pacjent widoczny z boku, od głowy do stóp

2


Chód bokiem do kamery

Na początku pacjent siedzi na krześle. Idziesz obok, trzymając urządzenie na stałej wysokości i w stałej odległości.

1. Pacjent wstaje z krzesła.
2. Idzie w jedną stronę.
3. Obraca się o 180°.
4. Wraca do punktu startu.
5. Siada.


Pacjent przechodzi tylko raz.

Cztery błędy, po których nagranie trzeba powtórzyć

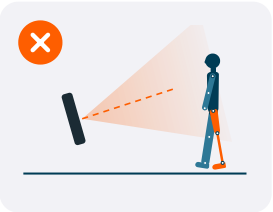


Pochylone urządzenie

Kamera patrzy w górę lub w dół i zniekształca kąty. Trzymaj urządzenie pionowo.

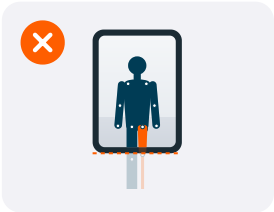


Stopy poza kadrem

Mogą na chwilę zniknąć, ale przez większość nagrania muszą być widoczne. Jeśli się nie mieszczą, cofnij się (na iPhonie pomaga też 0.5×).

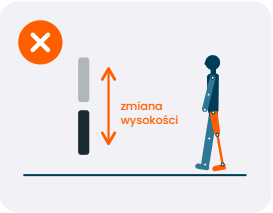

Podskakująca kamera

Gwałtowne podnoszenie i opuszczanie urządzenia przesuwa kadr. Trzymaj je stabilnie przez całe nagranie.

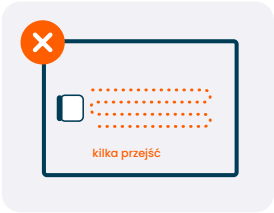

Kilka przejść w jednym pliku

Pacjent przechodzi raz: tam, obrót, z powrotem i siada.

---

ai'am motion

Instrukcja nagrywania w aplikacji ai'am motion. W razie problemów napisz do nas: support@aiam.care