
ai'am motion


Записи для базового звіту


Два короткі записи ходьби, зняті з рук на iPad або iPhone у застосунку ai'am motion.

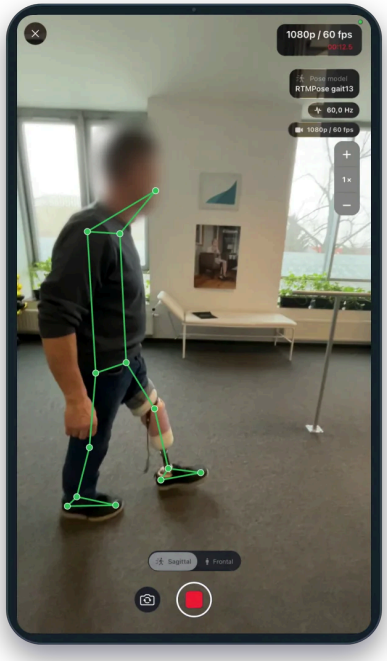

Запис збоку. Застосунок сам позначає суглоби, а ви стежите за кадром.

У застосунку

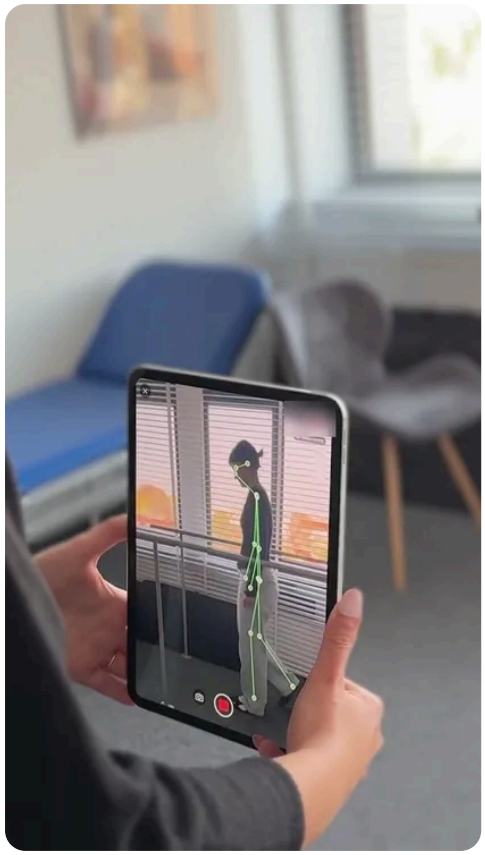


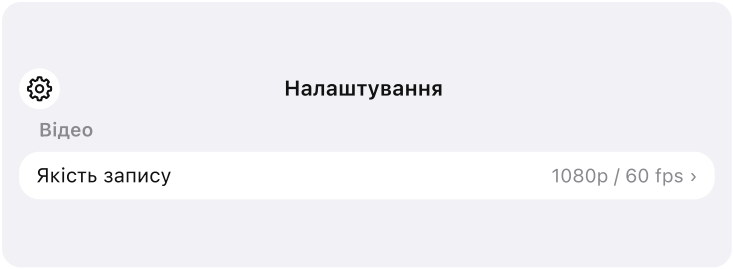

01

Налаштуйте якість відео


На екрані **Пацієнти** торкніться шестірні. У розділі **Відео** відкрийте **Якість запису** і виберіть **1080p / 60 fps**. Можна також 1080p / 30 fps.

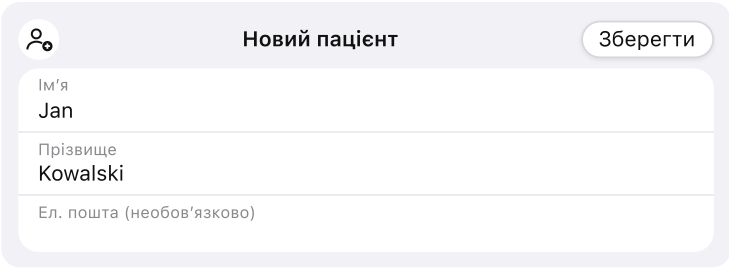

02

Додайте пацієнта


Торкніться значка людини з плюсом і введіть **Ім'я** та **Прізвище**. Ел. пошта й нотатки необов'язкові. Підтвердьте кнопкою **Зберегти**.

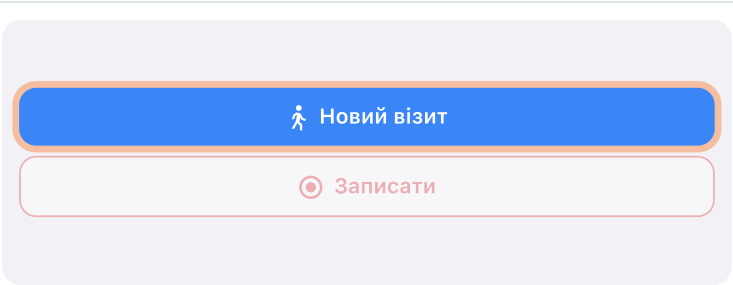

03

Розпочніть візит

Відкрийте пацієнта зі списку і торкніться **Новий візит**, а не **Записати**. У перегляді на суглобах з'являться точки й лінії.

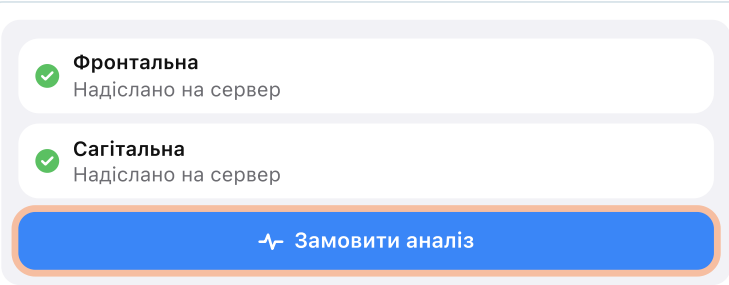


04

Замовте аналіз

Коли біля обох записів є **Надіслано на сервер**, підтвердьте дані візиту й мову звіту і торкніться **Замовити аналіз**.

Розташуйте пристрій до початку запису

Для обох записів діють ті самі три правила. Якщо не виконано хоча б одне, запис доведеться повторити.

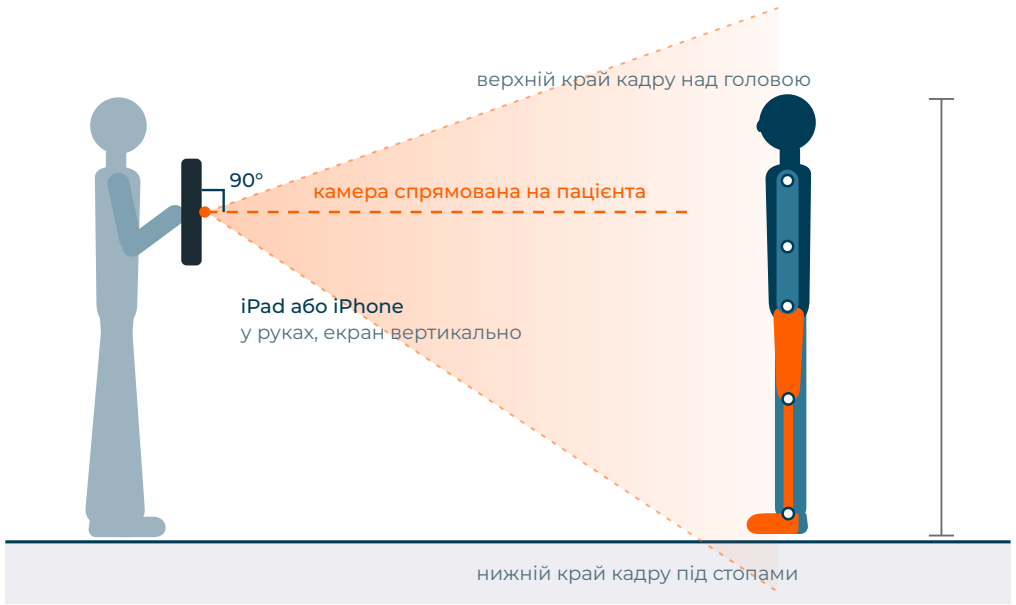

Вертикально, під прямим кутом до підлоги

Нахилений пристрій спотворює пропорції тіла та кути в суглобах.

Природно і стабільно


Не обов'язково цілитися точно в кульшові суглоби пацієнта. Тримайте пристрій так, як вам зручно, аби лише камера не гойдалася вгору-вниз під час запису.


Усе тіло в кадрі

Від голови до стоп, якомога довше під час запису. Якщо все тіло не вміщується, відійдіть назад.

Два записи ходьби

На схемах приміщення показано згори. Помаранчевий сектор означає поле зору камери. Поруч показано, що має бути на екрані.

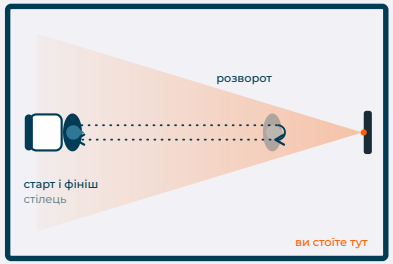

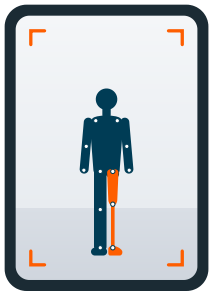

Пацієнт іде до вас, повністю в кадрі


1


Ходьба до камери

Спочатку пацієнт сидить на стільці. Станьте навпроти нього якомога далі, наскільки дозволяє приміщення, щоб дистанція ходьби була якомога довшою.

1. Пацієнт встає зі стільця.
2. Іде до камери.
3. Розвертається на 180°.
4. Повертається до точки старту.
5. Сідає на стілець.

Пацієнт проходить лише один раз.

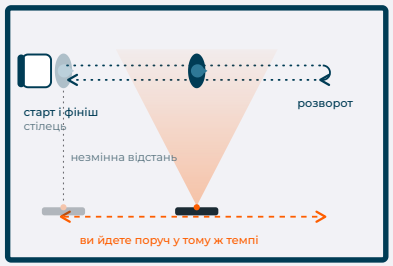

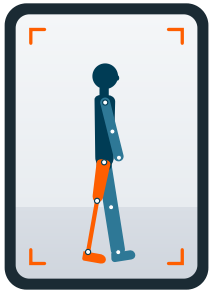

Пацієнт збоку, від голови до стоп

2


Ходьба боком до камери

Спочатку пацієнт сидить на стільці. Ви йдете поруч і тримаєте пристрій на незмінній висоті та відстані.

1. Пацієнт встає зі стільця.
2. Іде в один бік.
3. Розвертається на 180°.
4. Повертається до точки старту.
5. Сідає.


Пацієнт проходить лише один раз.

Чотири помилки, через які запис треба повторити

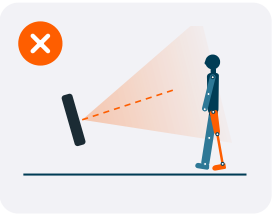


Нахилений пристрій

Камера дивиться вгору або вниз і спотворює кути. Тримайте пристрій вертикально.

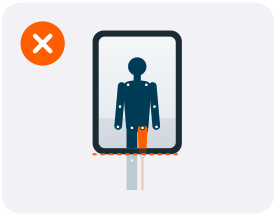


Стопи поза кадром

Вони можуть ненадовго зникати, але мають бути видимі більшу частину запису. Якщо не вміщуються, відійдіть назад (на iPhone також допомагає 0.5×).

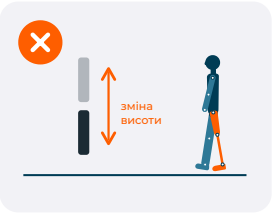

Камера гойдається

Різке піднімання й опускання пристрою зміщує кадр. Тримайте його стабільно впродовж усього запису.

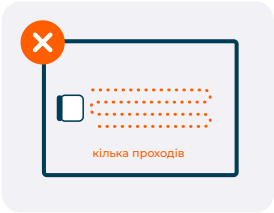

Кілька проходів в одному файлі

Пацієнт проходить один раз: туди, розворот, назад і сідає.

---

ai'am motion

Інструкція із запису в застосунку ai'am motion. Якщо виникнуть проблеми, напишіть нам на support@aiam.care